

Super Bypass

スーパーバイパス チタンファイン

MOYA

超極細 先端

もやもや病のバイパス鉗子

スーパーバイパスMOYAは先端が極細なので、
1mm以下の細動脈での端側吻合で、
鉗子先端を血管内腔に挿入し縫合針を貫く際に
より精度が高く容易に行うことができます。



POINT


従来品よりも半分の細さにしてあるため、
先端を血管の中へ入れ易くなっています。

鉗子の先端イメージ



型 番	有効長	先端プラットホーム	素材
SBTi-1607-MOYA	160mm	7mm	チタン
SBTi-1610-MOYA	160mm	10mm	チタン

本製品に関するお問い合わせは

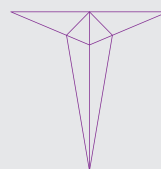

TAKAYAMA INSTRUMENT

製造許可番号：13B1X10292
販売名：スーパーバイパス鉗子ストレート型チタン
製造販売届出番号：13B1X10292000041
管理文書：TQD-SC0020-0003

製造販売元 株式会社 高山医療機械製作所
本社 〒110-0001 東京都台東区谷中3-4-4
TEL:03-3821-0249 FAX:03-3821-0344